

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór gebruik van Breathe Right® Neusstrips. Raadpleeg uw arts of apotheker als u nog vragen heeft.

1 Wat zijn Breathe Right Neusstrips en waarvoor worden ze gebruikt?

Breathe Right Neusstrips zijn flexibele veerachtige banden die de neusholtes voorzichtig openen om een betere luchtstroom mogelijk te maken.

Breathe Right Neusstrips zijn klinisch bewezen om uw neusholtes onmiddellijk te openen, zodat u makkelijker kunt ademen.

Breathe Right Neusstrips kunnen overdag of 's nachts worden gebruikt voor verlichting bij een verstopte neus door allergieën of verkoudheden.

Gebruiken als u last heeft van:

• Neusverstopping

Breathe Right Neusstrips openen de neus om te zorgen voor een betere ademhaling. Ze leveren tijdelijke verlichting bij neusverstopping die kan worden veroorzaakt door verkoudheden en allergieën. Breathe Right Neusstrips kunnen tijdelijke verlichting bieden van symptomen van verstopping of ademhalingsproblemen door een neusseptumafwijking. Ze mogen niet als alternatief worden beschouwd voor definitieve chirurgische correctie.

• Snurken

Door makkelijkere ademhaling via de neus in plaats van de mond mogelijk te maken, kunnen Breathe Right Neusstrips snurken helpen verminderen of zelfs doen verdwijnen. Voor de beste resultaten om snurken te verlichten, wordt het gebruik 's nachts aanbevolen.

Breathe Right Neusstrips kunnen worden gebruikt in combinatie met alle geneesmiddelen.

2 Hoe gebruikt u Breathe Right Neusstrips?

Wegwerpbaar – gebruik elke strip slechts één keer. Alleen voor eenmalig gebruik.

Kan overdag of 's nachts worden gebruikt.

Een correcte plaatsing helpt bij een maximale werking. Let erop dat u de strip niet te hoog of te laag aanbrengt.

De maat is belangrijk. Gebruik de juiste maat voor de beste resultaten. De Neusstrips in de maat small/medium passen voor 75% van de neuzen. De Neusstrips in de maat large zijn voor volwassenen met een grotere neus.

Speciale veerachtige band zorgt voor een voorzichtige opening van de neusholtes.

Gebruik de transparante variant voor droge/gevoelige huid.



1 Reinigen: Was en droog uw neus om vuil en olie te verwijderen. (Gebruik een samenrekkend middel voor vette huid.)



2 Plaatsing: Verwijder de liner en plaats de strip op de neus.



3 Aanbrengen: Druk de uiteinden naar beneden en wrijf er zacht over om de strip te bevestigen.



4 Verwijderen: Verwijder uw Breathe Right Neusstrip terwijl u uw gezicht wast met warm water of wanneer u een douche neemt. Verwijder de strip altijd langzaam. Maak de uiteinden los en trek aan de strip van beide kanten. Verwijder de strip met water om de kans op huidreacties of -letsels te verminderen.

3 Voor uw veiligheid

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Niet gebruiken op zweren of verbrande of geïrriteerde huid.
- Staak het gebruik als er huiduitslag of -irritatie optreedt.
- Het product niet meer dan 12 uur per dag gebruiken.
- Voor de beste prestaties zijn de strips uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Na het verwijderen verliest de sticker kleefkracht en blijft de strip niet op zijn plaats zitten.
- Het product buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Niet voor kinderen jonger dan 5 jaar.
- Het papier zakje waarin de strips zijn verpakt, kan natuurlijk rubberlatex bevatten. Dit kan mogelijk allergische reacties veroorzaken.
- Bij twijfel over het gebruik van dit product dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker.



HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN

Als u allergisch bent voor latex of voor Neusstrips van Breathe Right.

Slaapapneu: Breathe Right Neusstrips zijn niet bedoeld om slaapapneu te behandelen. Personen met symptomen van slaapapneu moeten hun arts raadplegen.

Bepaalde personen kunnen ongewenste reacties ervaren bij het gebruik van Breathe Right Neusstrips. Er kunnen reacties op de plaats van aanbrenging optreden (bv. erytheem, irritatie, pijn, exfoliatie, excoriatie, bloedingen, schilfering, verkleuring) en overgevoeligheidsreactie waaronder uitslag, jeuk en gezichtsodem.

Elk ernstig incident dat optrad en gerelateerd is aan dit product, moet worden gemeld aan de fabrikant en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (NL), of het FAGG (BE).

Het is belangrijk om productincidenten te melden, omdat dit kan helpen om fouten met dit medisch hulpmiddel te identificeren en om te helpen voorkomen dat vergelijkbare incidenten zich opnieuw voordoen.

4 Hoe bewaart u Breathe Right Neusstrips?

 Bewaren beneden 30 °C.
Bewaar het product in de originele verpakking.

Gooi het product weg in overeenstemming met de lokale vereisten en houd altijd rekening met het milieu. Gebruik dit product niet na de houdbaarheidsdatum die is aangegeven op de verpakking.

5 Overige informatie

De Neusstrips zijn individueel verpakt in zakjes en koud verzegeld met kleefstof. De koud verzegelde zakjes zijn verpakt in dozen.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de Breathe Right® Bandelettes Nasales. Si vous avez des questions, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

1 Qu'est-ce que Breathe Right Bandelettes Nasales et dans quels cas l'utiliser ?

Breathe Right Bandelettes Nasales sont des bandelettes élastiques flexibles qui dégagent les voies nasales par soulèvement afin d'améliorer le passage de l'air.

Il est cliniquement prouvé que Breathe Right Bandelettes Nasales ouvre instantanément les voies nasales afin de mieux respirer.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut être utilisé de jour ou de nuit pour soulager la congestion due aux allergies ou aux rhumes.

A utiliser si vous souffrez de :

• Congestion nasale

Breathe Right Bandelettes Nasales dégage le nez pour aider à mieux respirer en soulageant temporairement la congestion nasale qui peut être causée par les rhumes et allergies.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut procurer un soulagement temporaire des symptômes de congestion ou de respiration difficile dus à une déviation de la cloison nasale. Ce produit ne doit pas être considéré comme une alternative à la correction chirurgicale définitive.

• Ronflement

En facilitant la respiration à travers le nez au lieu de la bouche, Breathe Right Bandelettes Nasales peut aider à réduire ou même supprimer le ronflement. Pour de meilleurs résultats dans le soulagement du ronflement, il est recommandé de l'utiliser la nuit.

Breathe Right Bandelettes Nasales peut être utilisé avec d'autres médicaments.

2 Comment utiliser Breathe Right Bandelettes Nasales?

Jetable – N'utiliser chaque bandelette qu'une seule fois. Pour usage unique seulement. Peut être utilisé de jour comme de nuit.

Un positionnement correct de la bandelette vous aidera à obtenir des performances optimales. Attention à ne pas placer le produit trop haut ou trop bas.

Il est nécessaire d'utiliser la taille de bandelette adéquate pour un meilleur résultat. Les bandelettes nasales de petite/ moyenne taille conviennent à 75 % des nez, les bandelettes de grande taille conviennent aux adultes ayant un nez plus large.

La bande spéciale « ressemblant à un ressort » ouvre délicatement les voies nasales.

Utiliser la version transparente de Breathe Right Bandelettes Nasales pour les peaux sèches/sensibles.




1 **Nettoyer :** Laver et sécher la peau du nez afin d'enlever les impuretés et le sébum (pour les peaux grasses, utiliser une lotion astringente).



2 **Positionner :** Enlever la doublure protectrice et placer la bandelette sur le nez.



3 **Appliquer :** appuyer aux deux extrémités avec vos doigts et frotter délicatement pour bien fixer

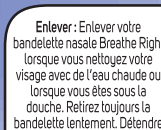

4 **Enlever :** Enlever votre bandelette nasale Breathe Right lorsque vous nettoyez votre visage avec de l'eau chaude ou lorsque vous êtes sous la douche. Retirez toujours la bandelette lentement. Détendez les extrémités puis retirez doucement la bandelette de chaque côté afin de réduire le risque de réactions cutanées

3 Pour votre sécurité

Mises en garde et précautions

- Pour usage externe uniquement
- Ne pas placer sur les lésions cutanées, les coups de soleil ou les irritations.
- Si une éruption ou une irritation cutanée se produit, cesser l'utilisation.
- Ne pas utiliser plus de 12 heures par jour.
- Pour un meilleur résultat, les bandelettes nasales sont à usage unique seulement. Après retrait, la bandelette perd son côté adhésif et ne restera pas en place.
- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 5 ans.
- Les sachets en papier où les bandelettes nasales sont conditionnées et peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin.

NE PAS UTILISER

Si vous êtes allergique au latex ou aux bandelettes nasales Breathe Right.

Apnée du sommeil : Breathe Right Bandelettes Nasales n'est pas destiné à traiter l'apnée du sommeil. Il est recommandé aux personnes présentant une apnée du sommeil de consulter un médecin.

Certaines personnes peuvent présenter des effets indésirables lors de l'utilisation de Breathe Right Bandelettes Nasales. Cela peut être des réactions au site d'application (exemple : érythème, irritation, douleur, exfoliation, excoriation) et des réactions d'hypersensibilité pouvant inclure des éruptions cutanées, prurit et œdème facial.

Tout incident sérieux survenant à l'occasion de l'utilisation de ce produit doit être communiqué au fabricant ainsi qu'à l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS). Il est important de communiquer tout incident lié à ce produit car cela permet d'identifier des défauts de ce dispositif médical et permet de prévenir la survenue d'incidents similaires à nouveau.

4 Comment conserver Breathe Right Bandelettes Nasales



Ne pas conserver au-dessus de 30°C.

A conserver dans son étui d'origine.

Veillez éliminer le produit conformément à vos exigences locales et de toujours tenir compte de l'environnement.

Ne pas utiliser après la date limite indiquée.

5 Autres informations

Breathe Right Bandelettes Nasales sont conditionnées dans une boîte avec des emballages individuels et scellés avec un adhésif.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Breathe Right Nasenstrips anwenden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1 Was sind Breathe Right Nasenstrips und wofür werden sie angewendet?

Breathe Right Nasenstrips sind flexible, federartige Streifen, welche die Nasengänge sanft anheben und weiten, damit mehr Luft durchströmen kann.

Es ist klinisch nachgewiesen, dass Breathe Right Nasenstrips sofort die Nasengänge weiten, damit Sie besser atmen können.

Breathe Right Nasenstrips können tagsüber oder nachts verwendet werden, um die Atmung bei Allergien oder Erkältungen zu erleichtern.

Anwendung bei:

• Verstopfter Nase

Breathe Right Nasenstrips öffnen die Nase und ermöglichen eine bessere Atmung, indem sie vorübergehend von verengter und verstopfter Nase befreien, wie sie durch Erkältungen und Allergien verursacht werden kann.

Breathe Right Nasenstrips können vorübergehend die Symptome von verstopfter Nase oder von Atembeschwerden bei einer Nasenscheidewandverkrümmung lindern. Sie sollten nicht als Alternative zur endgültigen chirurgischen Korrektur angesehen werden.

• Schnarchen

Breathe Right Nasenstrips erleichtern das Atmen durch die Nase anstatt durch den Mund und können so dazu beitragen, Schnarchen zu lindern oder sogar zu beseitigen. Für optimale Hilfe bei Schnarchen wird die nächtliche Anwendung empfohlen.

Breathe Right Nasenstrips können gemeinsam mit allen Arzneimitteln angewendet werden.

2 Wie sind Breathe Right Nasenstrips anzuwenden?

Einwegartikel – verwenden Sie jeden Strip nur einmal. Nur zum einmaligen Gebrauch. Kann tagsüber und nachts verwendet werden.

Eine korrekte Platzierung sorgt für optimale Ergebnisse. Achten Sie darauf, dass Sie ihn weder zu hoch noch zu niedrig anbringen.

Die Größe ist wichtig, verwenden Sie die richtige Größe, um die beste Wirkung zu erzielen. Die Nasenstrips in normaler Größe passen auf 75 % aller Nasen, große Nasenstrips sind für Erwachsene mit einer größeren Nase.

Der spezielle, federartige Streifen öffnet sanft die Nasengänge.

Verwenden Sie bei trockener/empfindlicher Haut die transparente Variante.



1 **Reinigen:** und trocknen Sie Ihre Nase, um Schmutz und Öle zu entfernen. (Verwenden Sie ein Astringends.)



2 **Anbringen:** Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie den Nasenstrip auf der Nase an.



Zu hoch



Zu tief



3 **Befestigen:** Drücken Sie auf die Enden und reiben Sie leicht, um den Nasenstrip zu befestigen.

4 **Entfernen:** Entfernen Sie Ihren Breathe Right Nasenstrip, während Sie Ihr Gesicht mit warmem Wasser waschen oder eine Dusche nehmen. Ziehen Sie den Nasenstrip immer langsam ab. Zuerst die Enden lösen, danach beide Seiten vorsichtig hochziehen. Entfernen Sie den Strip gründlich mit Wasser, um die Wahrscheinlichkeit von Hautreaktionen oder Verletzungen zu reduzieren.

3 Zu Ihrer Sicherheit

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf wund, sonnenverbrannter oder gereizter Haut anwenden.
- Bei Ausschlag oder Hautreizung nicht weiter verwenden.
- Nicht länger als 12 Stunden pro Tag verwenden.
- Die Strips sind aus Gründen der Funktionstüchtigkeit nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach dem Entfernen verliert der Kleber an Haftung und der Strip klebt nicht mehr richtig.
- Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht für Kinder unter 5 Jahren.
- Die Papiersachets der Strips können Naturlatex enthalten, der allergische Reaktionen auslösen kann.
- Bei Fragen zur Anwendung dieses Produktes fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

NICHT ANWENDEN

wenn Sie allergisch gegen Latex oder Breathe Right Nasenstrips sind.

Schlafapnoe: Breathe Right® Nasenstrips sind nicht für die Behandlung von Schlafapnoe vorgesehen. Personen mit Symptomen von Schlafapnoe sollten Ihren Arzt zu Rate ziehen.

Bei der Anwendung von Breathe Right Nasenstrips können bei einigen Menschen Nebenwirkungen auftreten. Dies können Reaktionen an der Applikationsstelle (z.B. Rötung, Reizung, Schmerzen, Hautabschälung, Blutungen, Schorf und Verfärbungen) und Überempfindlichkeitsreaktionen wie Ausschlag, Jucken oder Schwellung sein.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit diesem Produkt ereignet hat, sollte dem Hersteller und der Förderagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte gemeldet werden. Es ist wichtig, Produktvorfälle zu melden, da dies dazu beitragen kann, Fehler mit diesem Medizinprodukt zu identifizieren und ähnliche Vorfälle zu verhindern.

4 Wie sind Breathe Right Nasenstrips aufzubewahren?

 ^{30°C} Nicht über 30°C lagern.
In der Originalverpackung aufbewahren.


Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß Ihren lokalen Anforderungen und berücksichtigen Sie dabei immer die Umwelt.

Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden, das auf der Verpackung angegeben wird.


5 Weitere Informationen

Die Nasenstrips sind einzeln in Papiersachets verpackt und mit Klebstoff kalt versiegelt. Die kalt versiegelten Papiersachets sind in Kartons verpackt.


Opgelet: Lees voordat u het product gebruikt zorgvuldig de gebruiksaanwijzing in de verpakking.

 Attention : avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement la notice contenue dans cet étui.

Vorsicht: Vor der Anwendung die enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.

 Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Nicht verwenden, wenn die Umverpackung beschädigt ist.

 Einmalig gebrauch: De neusstrips zijn voor eenmalig gebruik.
Usage unique : les bandelettes nasales sont à usage unique.

Einmalanwendung: Nasenstrips zum einmaligen Gebrauch.



Het papieren zakje waarin de strips zijn verpakt, kan natuurlijk rubberlatex bevatten. Les sachets en papier autour des bandelettes nasales peuvent contenir du latex de caoutchouc naturel.

Die Papiersachets der Strips können Naturlatex enthalten.



Lotnummer: zie doos.

Numéro de lot : voir étui.

Chargennummer: siehe Karton.



Te gebruiken tot datum weergegeven als JJJJ-MM

Date limite au format AAAA-MM

Verfallsdatum im Format JJJJ-MM angegeben



Foundation Consumer Brands, LLC, Pittsburgh, PA 15212, USA.



Brandshapers Ltd, Ardavan, Co. Wexford, Y35 Y19A, Ireland.

TheOTCLab, Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam,
The Netherlands.

www.breatheright.com



Medisch hulpmiddel/ Dispositif médical/ Medizinprodukt

Datum/Date : 02/2021

Handelsmerken eigendom van of gelicentieerd door FCB. ©2021 FCB of licentiehouder.

Marques de commerce détenues ou sous licence par FCB. ©2021 FCB ou concédant.

FCB ist Eigentümer oder Lizenznehmer der Marken. ©2021 FCB oder Lizenzgeber.

31050384